



BANTE
instruments


JB-1A 磁力搅拌器

中文使用手册




搅拌液体

1. 将容器放置在工作盘中间位置并放入搅拌棒。
2. 顺时针旋转调速旋钮，开关发出“咯”的声音，搅拌棒随即开始转动。

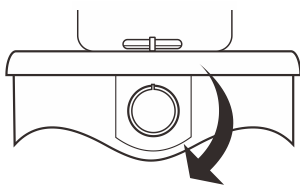

3. 缓慢旋转调速旋钮，搅拌棒逐渐加速，容器内的液体逐渐形成涡流。

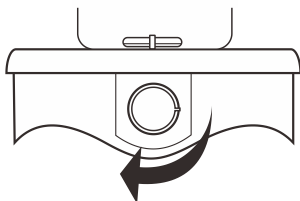

① 提示:

- 启动搅拌器后请勿将调速旋钮旋至最大，否则搅拌棒会因为失速而停止转动。
- 如果搅拌棒出现失速现象，请逆时针旋转调速旋钮直到搅拌棒停止转动再缓慢加速。
- 如果调速旋钮已旋至最大但搅拌力任然不够强劲，请轻微移动放置在面板上的容器。

技术参数

型号	JB-1A
最大搅拌容量	2 升 (H ₂ O)
搅拌速度	0 至 1250 rpm
工作盘尺寸	直径 145mm
工作盘材质	PC
搅拌棒尺寸	30 (长) × 7 (直径) mm
环境温度	室温至 60°C
外形尺寸	185 (直径) × 75 (高) mm
电源要求	AC 220V/50Hz
重量	0.6kg

Hazardous Substance Statement

Bante Instruments is committed to the reduction and eventual elimination of all hazardous substances in both the manufacturing process and finished products we supply. We have an active manufacturing and procurement program to minimize and eliminate the use of harmful heavy metals such as cadmium, lead, mercury and the like. New technologies and design parameters are also promoting these efforts and we expect to have little or no such materials in our product in the coming years. We welcome our customer suggestions on how to speed up these efforts.



Warranty

The warranty period for stirrer is one year from the date of shipment. Above warranty does not cover the stir bar. Out of warranty products will be repaired on a charged basis. The warranty on your stirrer shall not apply to defects resulting from:

- Improper or inadequate maintenance by customer.
- Unauthorized modification or misuse.
- Operation outside of the environment specifications of the products.

For more information, please contact the nearest authorized distributor.



上海般特仪器有限公司
上海市中山南二路 777 弄 2 号 1606 室
电话: 021-6404-1598
传真: 021-6416-4119
邮件: banteinstruments@yahoo.com
网站: www.bante-china.com

BANTE INSTRUMENTS CO., LTD
E-mail: banteinstruments@yahoo.com
Phone: +8621-6404-1598
Website: www.bante-china.com